

mectron



→ MECTRON EASYJET PRO



# → EASYJET PRO

## Pulverstrahl für die Turbinenkupplung

→ Das easyjet pro eröffnet vollkommen neue Perspektiven für Turbinenkupplungen. Durch einfaches Aufstecken (Klickmechanismus) wird die Turbine zum vollständigen Prophylaxegerät mit allen wesentlichen Eigenschaften der bewährten Tischgeräte von mectron: konstanter, leistungsstarker Pulverstrahl, einfaches Handling und Zuverlässigkeit. Design und Konstruktion sorgen dafür, dass easyjet pro optimal in der Hand liegt und dadurch eine jederzeit kontrollierte Ausrichtung des Pulverstrahls erfolgt.

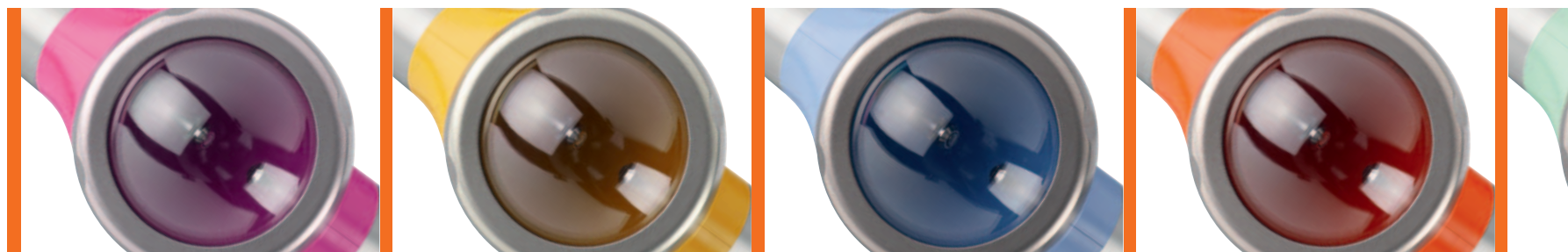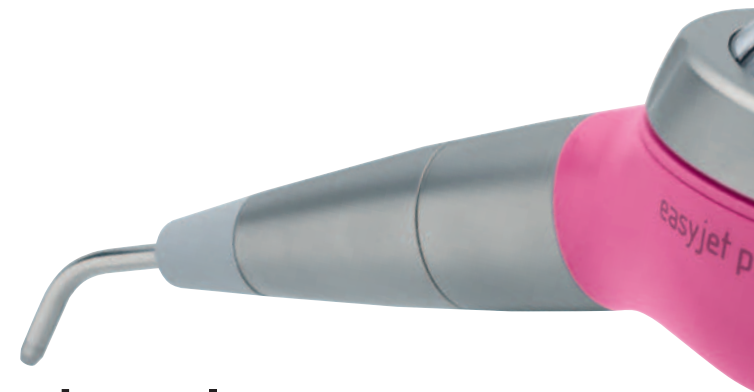



→ FARBEN  
Das easyjet pro wird  
in 7 verschiedenen  
Farben angeboten  
und wird so sicher ein  
Prophylaxe-Highlight  
Ihrer Praxis sein!

# → DIE TECHNIK

## zuverlässig und ergonomisch

→ Das easyjet pro zeichnet sich durch seine ausgereifte Technik aus, die vor allem eine hohe Zuverlässigkeit der Geräte gewährleistet. Alle Bestandteile sind für die alltägliche Verwendung in der Praxis optimiert.



### → SPRAYHANDSTÜCK

- 120° gewinkelt
- einfach aufsteckbar (Klickmechanismus)
- um 360° drehbar
- Pulver und Wasser werden bis zur Spitze getrennt geführt
- das Wasser ummantelt den Luft-/Pulverstrahl und verhindert so die Bildung von Pulverwolken
- voll sterilisierbar



### → PULVERKAMMER

- 14 g Fassungsvermögen
- neuartige Kiementechnik ermöglicht konstanten und leistungsstarken Pulverstrahl
- kein Verstopfen

### → TECHNISCHE DATEN

- Druckluft zwischen 2,3 und 3,2 bar
- Wasserdruck zwischen 0 und 3 bar

CE  
0476



→ SILIKON-PROTEKTOR

- schützt die Zähne
- verhindert das Eindringen von Schmutz
- auswechselbar
- voll sterilisierbar



→ PULVERKAMMERDECKEL

- Edeltstahlring mit Griffmulden
- transparente Kappe für permanente Füllstandkontrolle
- triangulär geformtes Gewinde für einfaches Öffnen der Pulverkammer ohne Kraftaufwand
- ragt in die Pulverkammer und verhindert so Ablagerungen auf dem Gewinde





# DIE TURBINENADAPTER

→ Mit seinen sechs verschiedenen Turbinenadaptern bietet das easyjet pro ein hohes Maß an Flexibilität. Nur ein Klick und schon kann die Prophylaxebehandlung beginnen. Im Falle eines Wechsels der Turbinenkupplung kann der Turbinenadapter durch einen autorisierten mectron Service getauscht werden.



→ BIEN AIR UNIFIX  
UND UNIFIX L



→ KAVO MULTIFLEX  
UND MULTIFLEX LUX



→ SIRONA R UND B



→ W & H ROTO QUICK  
UND ROTO QUICK LUX



→ MIDWEST



→ BORDEN

# PROPHYLAXIS POWDER

→ Das mectron prophylaxis powder wird in praktischen Kunststoffflaschen à 250 g geliefert, jede Originalverpackung enthält zwei Flaschen.



## WIRKUNG

Hochbeschleunigte Natriumbikarbonat-Partikel in Verbindung mit temperiertem Wasser ermöglichen einen kontrollierten und präzisen Pulverstrahl. Zahnverfärbungen werden wirksam und schonend weggesprüht – selbst in den Zahnzwischenräumen schneller und gründlicher als beim Einsatz von Gummikelch und Polierpaste.



Vor, während und nach der easyjet pro-Behandlung

## QUALITÄT

Die optimierte Fließfähigkeit und die Hydrophobierung verhindern Verklumpungen. Dies ermöglicht einen konstanteren Pulverstrom und somit bessere Behandlungsergebnisse.



## GESCHMACK

Der Geschmack basiert auf einem neuen konzentrierten Zitronenaroma mit Süßstoff-Anteil, das als besonders angenehm und frisch empfunden wird.

## DOSIERUNG

Jede Flasche mectron prophylaxis powder wird mit eigenem Messbecher geliefert, die Markierungen zeigen die adäquaten Mengen für das jeweilige mectron Pulverstrahlgerät an.



••••• DIESE FARBEN PASSEN PERFEKT IN  
IHR PRAxis. DIE PREISE IN IHR BUDGET.  
**MECTRON EASYJET PRO**

••••• [www.mectron.de](http://www.mectron.de) oder [info@mectron.de](mailto:info@mectron.de)

mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherrstr. 80/2001, 51069 Köln, tel +49 221 492015 0, fax +49 221 492015 29  
mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), ITALIA, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374



**mectron**

medical technology

© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italien  
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder und Grafiken der mectron-Broschüren unterliegen dem Schutz des  
Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Ohne schriftliche Zustimmung der mectron S.p.A. dürfen die Inhalte  
nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

DEP1013DE1007